




EN-Motion



Лучшая беговая дорожка PHYSIO



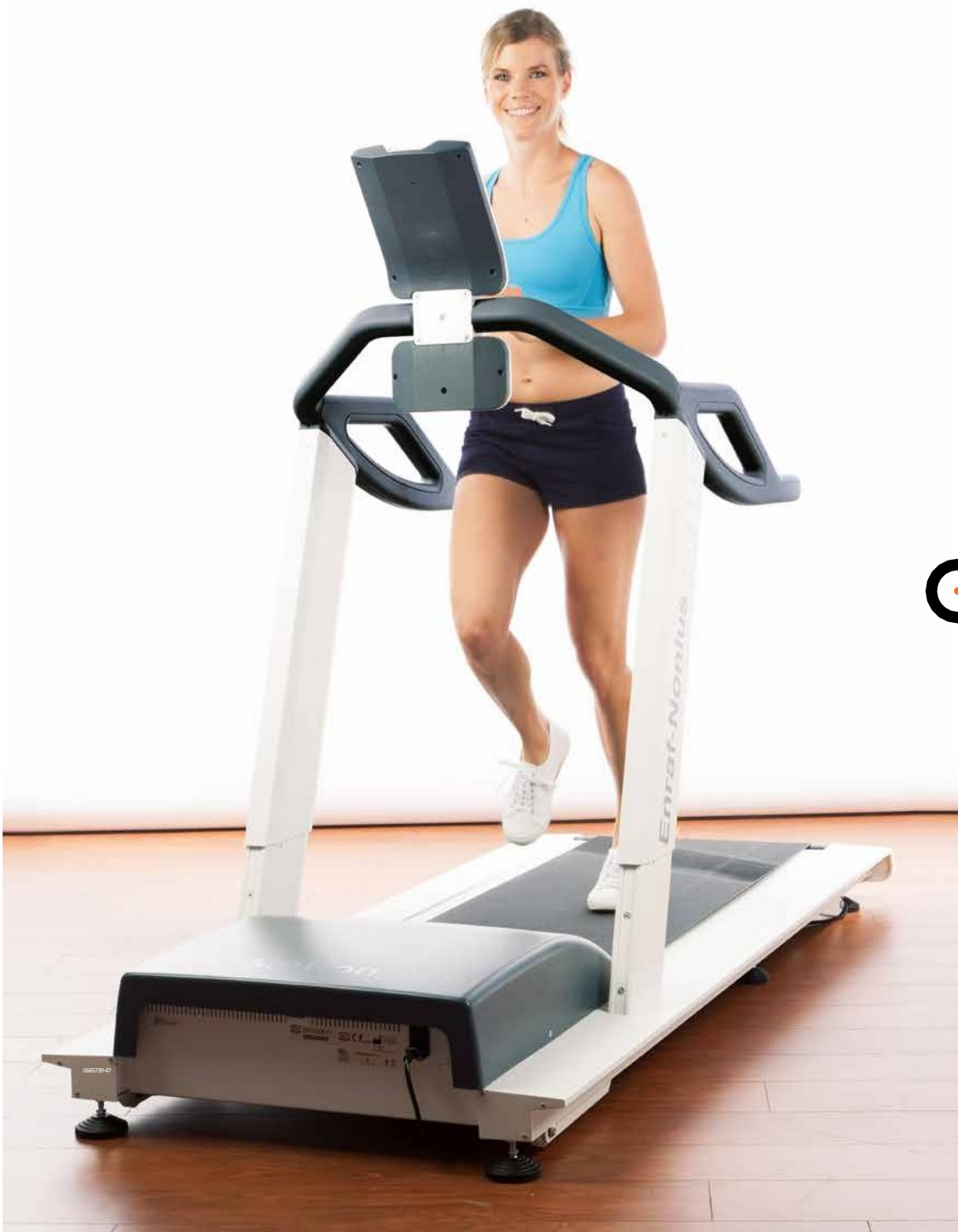

EN-Motion

Беговая дорожка EN-Motion — ценный инструмент в сфере физиотерапии и реабилитации.

Инновационная беговая дорожка, идеально подходящая для физиотерапии и реабилитации.

EN-Motion заставляет мир двигаться

EN-Motion объединяет в себе проверенное временем надежное качество Enraf-Nonius и практический опыт специалистов по движению: это прочная, современная и стильная беговая дорожка, обеспечивающая непревзойденную производительность, при этом в ее конструкции особое внимание уделяется безопасности и эргономике. EN-Motion — это беговая дорожка, которая идеально отвечает потребностям и требованиям специалистов по движению как сегодня, так и в будущем.



EN-Motion: лучшая беговая дорожка для физиотерапии

EN-Motion

Автоматическая регулировка скорости

Автоматическая регулировка скорости — это революционная функция, обеспечивающая максимальный комфорт при движении. Беговая дорожка автоматически подстраивается под скорость пользователя, без необходимости нажимать на кнопки управления. Хотите идти быстрее или медленнее? Датчик движения EN-Motion быстро и эффективно преобразует это в вашу идеальную скорость ходьбы. Без каких-либо действий с вашей стороны — кроме ходьбы в удобном для вас темпе! Автоматическая регулировка скорости обеспечивает оптимальный комфорт при движении, идеально подходящий для тестов на физическую нагрузку, таких как 6-минутный тест ходьбы (6 MWT). Автоматическая регулировка скорости продвигает процесс физиотерапии и реабилитации!

Тесты

Помимо функциональных программ упражнений (которые можно адаптировать по мере необходимости), вы можете выбирать из различных тестов, включая 6 MWT. Благодаря функции автоматической скорости вы можете быть уверены, что этот тест будет проведен надежно! Данные теста сравниваются со стандартными данными и наглядно представлены. Не сомневайтесь — с EN-Motion вы сделаете большой шаг вперед в области клинметрии.

Чрезвычайно низкая высота ступеньки

Первый шаг на пути к выздоровлению делается очень быстро. Благодаря чрезвычайно низкой высоте ступеньки — всего 12,5 см — EN-Motion является самой доступной медицинской беговой дорожкой в мире. Это уникальное решение в физиотерапии и высоко ценимая инновация как для пациентов, так и для терапевтов.





EN-Motion

Прогрессивная амортизация (PSA)

PSA — это специальный метод амортизации, который обеспечивает плавную амортизацию в любое время. Это предотвращает ненужную нагрузку на суставы, независимо от веса или стиля ходьбы вашего пациента. Даже самые чувствительные пациенты могут без труда пользоваться EN-Motion. Лента выдерживает вес до 235 кг.

Пользовательский интерфейс

EN-Motion очень удобен в использовании и оснащен цветным дисплеем с яркими графическими функциями. Результат: четкое и точное отображение вашей тренировки или теста. Кроме того, информация представлена в очень креативном и художественном стиле.

Технология Dual Slope (DST)

Одним нажатием кнопки вы устанавливаете желаемый угол наклона. С помощью системы DST можно устанавливать не только положительные углы наклона (до +15 %), но и отрицательные (до -10 %). Идеально подходит для концентрических и эксцентрических тренировок мышц.



EN-Motion

Электрические боковые поручни

Нужно быстро и легко установить идеальную высоту для пациентов, которым требуется временная (частичная) поддержка веса? Для EN-Motion это не проблема! Благодаря широкому диапазону настроек EN-Motion идеально подходит как для детей, так и для очень высоких взрослых. Открытая конструкция облегчает наблюдение за манерой ходьбы.

Многофункциональные поручни

Многофункциональные боковые поручни: благодаря специальной форме и используемым материалам многофункциональные поручни не только удобны и безопасны, но и обеспечивают достаточную опору и безопасность для каждого пациента.

Бесшумный двигатель

EN-Motion оснащен мощным, но тихим двигателем.

Сделайте шаг вперед. Перейдите на EN-Motion!

* - Только на модели EN-Motion Plus





EN-Motion

EN-Train

Вы работаете с EN-Train? В таком случае беговая дорожка EN-Motion станет идеальным выбором и для вас. Благодаря привычной чип-карте управление EN-Motion осуществляется быстро и просто. Результаты тренировок и тестов пациентов сохраняются автоматически. Программное обеспечение EN-Train облегчает «удаленную персональную поддержку»!

EN-Motion — это медицинское устройство

Разумеется, EN-Motion соответствует медицинским директивам (MDR) и гарантирует ответственное с медицинской точки зрения лечение и высокую степень безопасности.

Нагрузка до 235 кг

С максимально допустимым весом пациента 235 кг EN-Motion является идеальной беговой дорожкой для соблюдения рекомендаций по лечению ожирения. Для дополнительной поддержки и руководства пациент и терапевт могут ходить вместе на этом революционном тренажере.

От медленного до быстрого

Благодаря диапазону скоростей от 0,4 км/ч до 18 км/ч (регулируемому с шагом 0,1 км/ч) EN-Motion является очень универсальным устройством не только в области лечения пациентов, но и в отношении профилактических тренировок (физиотерапевтическая фитнес-программа). Для молодых и пожилых, больших и маленьких!

EN-Motion

Наглядная панель управления

Панель управления отличается наглядностью: она оснащена переключателем и несколькими кнопками, позволяющими быстро и легко выбирать функции или запускать сеанс терапии или тестирования. Интуитивно понятная концепция управления гарантирует, что не будет потрачено лишнее время и не будет предоставлена запутанная информация. EN-Motion всегда готов к работе!

Протоколы тестирования

EN-Motion в стандартной комплектации имеет различные протоколы для тестирования физической нагрузки, включая 6-минутный тест ходьбы (6MWT). Он предоставляет надежные и подробные данные тестирования, которые в то же время легко интерпретировать. Это упрощает сбор объективных данных для клинометрических целей.

Протоколы упражнений

Помимо работы с фиксированными протоколами (14), вы можете определить и сохранить до 30 личных протоколов упражнений.

Цветной TFT-экран

Для кристально четкого изображения и легко читаемой информации. Понятно как для пациента, так и для терапевта. Уникальное графическое отображение гарантирует мотивирующие тренировки!




Дизайн и функциональность

EN-Motion с его прочной и надежной конструкцией станет настоящим украшением вашей клиники. Это стильная беговая дорожка, привлекающая внимание не из-за шума (у нее очень тихий двигатель), а благодаря своему дизайну и производительности.



EN-Motion

- Консоль управления
- Удобство в использовании
- Эргономичный
- Полный цвет
- Четкая информация
- TFT с высоким разрешением
- Кристально четкие изображения
- Отображение результатов тестирования
- Работа с чип-картами
- Графические профили упражнений

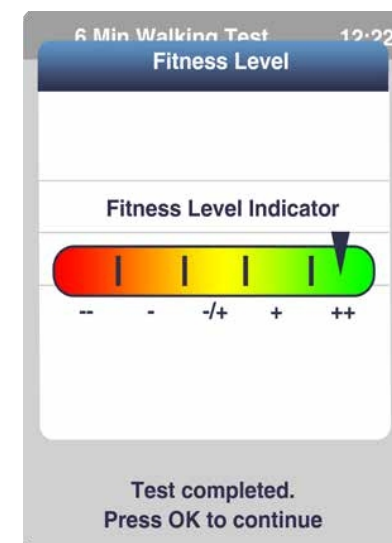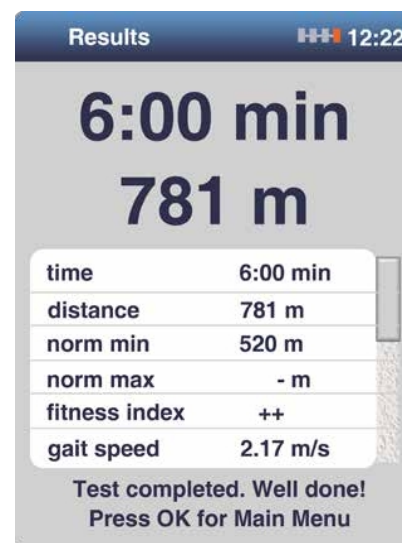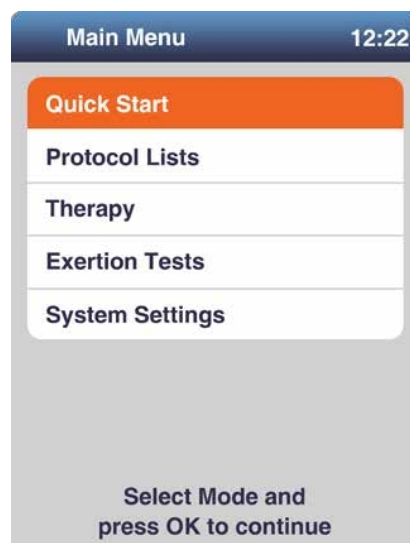

EN-Motion

1665901 EN-Motion 230 В (фиксированные боковые поручни)

1665905 EN-Motion 230 В (фиксированные боковые поручни и подножка)



1665902 EN-Motion Plus 230 В (боковые поручни с электроприводом) 1665906 EN-Motion


Plus 230 В (боковые поручни с электроприводом

и подножка)



Стандартные аксессуары

1665760	Инструкция по применению
1665761	Информационный буклет
1665802	Поясной ремень с магнитной аварийной остановкой

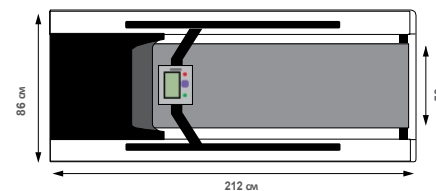

EN-Motion

АКСЕССУАРЫ

Дополнительные аксессуары

1665805	Кнопка аварийной остановки для пациента
1665801	Наклонная платформа
3496837	Нагрудный ремень для регистрации частоты сердечных сокращений
1665804	Подставка для подъема (комплект из 2 боковых опор)



1665805



3496837



1665801



1665804



EN-Motion

СВЯЗАННЫЕ ТОВАРЫ

EN-Motion

EN-Train

Концепция EN-Train обеспечивает полный контроль над процессом активной реабилитации, гарантируя оптимальное лечение в любой момент времени. Программы тренировок можно легко составлять с помощью рекомендаций по тренировкам, уже запрограммированных в программном обеспечении.

Данные для заказа

1411811 Комплект для установки EN-Train



АКСЕССУАРЫ



Питание:	230 В
Двигатель:	Двигатель постоянного тока, 3,5 л.с.
Мощность двигателя:	2600 Вт
Мин./макс. скорость:	0,4–18 км/ч (с шагом 0,1 км/ч)
Угол положительного уклона:	от 0% до +15% (с шагом 0,5%)
Угол отрицательного наклона:	от 0% до -10% (с шагом 0,5%)
Размеры:	212 x 86 x 148 см (Д x Ш x В) (высота включает установленную консоль)
Полезная площадь:	150 x 50 см
Высота боковых перекладин:	76 см – 93,5 см (расстояние от поверхности для ходьбы до нижней и верхней стороны поручней соответственно)
Высота боковых поручней (тип «Plus»): регулировки (тип «Plus»):	61 см – 108,5 см (расстояние от поверхности для ходьбы до нижней и верхней стороны перекладин) Общий диапазон 30 см (электрическая регулировка)
Высота подножки:	12,5 см (типы «Стандарт» и «Плюс»)
Вес беговой дорожки:	150 кг (тип «Стандарт») 165 кг (тип «Плюс»)
Максимальный допустимый вес пациента:	235 кг
Дисплей:	Цветной ЖК/TFT-дисплей (с подсветкой)
Профили тренировок (фиксированные программы):	14
Профили тренировок (задаваемые пользователем):	30
Это медицинское изделие	Оно соответствует всем применимым медицинским нормам. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с инструкцией по использованию (можно скачать на сайте www.enraf-nonius.com).



ЕРИСТИКИ И
ТРЫ

EN-Motion



Лучшая беговая дорожка PHYSIO



Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Роттердам | Нидерланды www.enraf-nonus.com

info@enraf-nonus.nl

+ 31 - (0) 10 20 30 600



PARTNER FOR LIFE